




COMODINI E TAVOLI SERVITORI
Bedside cabinets and overbed tables

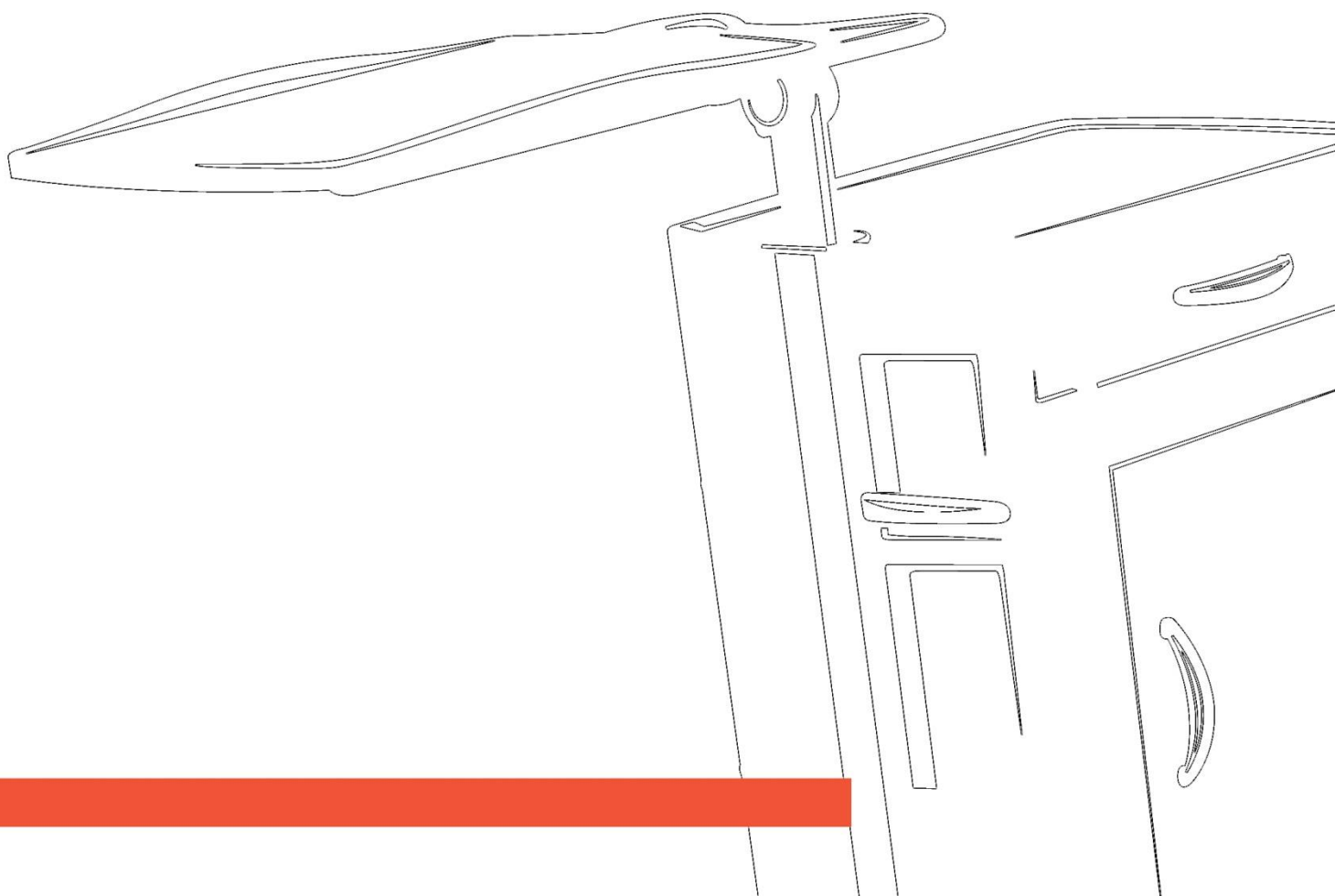

Comodini e tavoli servitore

Bedside cabinets and overbed tables



Comodini e tavoli servitore

Bedside cabinets and overbed tables



Il produttore si riserva di apportare quelle modifiche tecniche ed estetiche che ritiene più opportune, anche senza preavviso.
È vietata la copia o altra forma di riproduzione del catalogo o di una parte dello stesso, e di tutti gli elementi protetti da copyright,
senza la previa autorizzazione scritta da parte di Karismedica.

*It is at the manufacturer's discretion to make appropriate esthetical and technical modifications deemed necessary without advance notice.
Copying or other reproduction of all or part of this catalogue, or any copyrightable subject matter
without the prior written permission of Karismedica is prohibited.*

Comodini bifronte con scocca in materiale plastico

Double sided patient bedside cabinets in moulded plastic

Caratteristiche Standard:

Standard Features:

SCocca

Scocca realizzata in polietilene stampato. La geometria è caratterizzata da linee arrotondate, prive di spigoli che consentono un'efficace sanificazione ed evitano punti di accumulo dello sporco. Il piano superiore è dotato di ampia superficie di appoggio e bordo perimetrale di contenimento.

Il vano interno presenta a metà altezza un piano di appoggio asportabile in materiale plastico e una griglia rimovibile sul fondo per garantire l'aerazione.

Sui fianchi sono presenti, da un lato, un vano con portasalviette in materiale plastico e, dall'altro, due vani portabicchieri e due vani portabottiglia con fondo inclinato verso l'esterno, per facilitare l'estrazione della bottiglia, tutti dotati di fascette di contenimento.

I comodini sono bifronte, dotati di due ante, un cassetto e un ripiano asportabile. Sono disponibili modelli con o senza tavolo servitore integrato. Possibilità di accogliere l'accessorio tesoretto.

GEOMETRIA ARROTONDATA

La scocca realizzata in materiale plastico stampato in un unico blocco, con geometria arrotondata su tutti i lati e priva di spigoli, garantisce facilità di pulizia e disinfezione, evitando zone di accumulo dello sporco.

COMODI PORTABOTTIGLIE

Il fondo inclinato verso l'esterno facilita l'estrazione della bottiglia.

PARACOLPI E RUOTE

La scocca sui quattro angoli della parte inferiore termina con sporgenze arrotondate che svolgono la funzione di paracolpi. Sul fondo sono fissate quattro ruote gemellari piroettanti di diametro 55 mm con guscio di protezione.

RUOTE GEMELLARI PIROETTANTI

Le quattro ruote gemellari con guscio di protezione consentono l'agevole movimentazione del comodino.

TESORETTO (OPZIONALE)

Il tesoretto, collocato ad un'altezza accessibile dal paziente anche dal letto, è un accessorio che si inserisce nella scocca ed è dotato di chiave con serratura.

BODY

Made in polyethylene. Geometrically designed with rounded elements. No sharp edges allows efficient cleaning and eliminates areas of dust collection. Ample work surface with raised outer edges to avoid spills.

The internal compartment contains an extractable plastic shelf and removable grid on bottom to guarantee ventilation.

Side panels include: plastic tissue box; two cup holders, two bottle holders all outward facing to allow easy access. All accessories have holder covers.

The bedside cabinets are double sided, fitted with two doors, one drawer and one removable shelf. They can be supplied either with or without a fixed over-bed serving table. Optional personal items storage compartment.

ROUNDED SHAPE

The product single-piece material construction and rounded shape greatly simplify cleaning and disinfection procedure.

HANDY BOTTLE HOLDERS

The outward facing holder makes bottle extraction easy.

CORNER BUMPERS AND CASTORS

Four protective rounded corner bumpers on bottom of body structure. Four twin swivel castors diam. 55 mm with protective shell mounted to base support.

TWIN SWIVEL CASTORS

The four twin castors with protection cover allow easy manoeuvring.

PERSONAL ITEM COMPARTMENT (OPTIONAL)

The personal item compartment is a key lockable accessory that is easily accessible, even from the patient bed.

Comodini bifronte con scocca in materiale plastico

Double sided patient bedside cabinets in moulded plastic

Caratteristiche Standard:

Standard Features:



GEOMETRIA ARROTONDATA
ROUNDED SHAPE



VANO LATERALE PORTA ASCIUGAMANI
TOWEL HOLDER LATERAL COMPARTMENT



COMODI PORTABOTTIGLIE
HANDY BOTTLE HOLDERS



TESORETTO (OPZIONALE)
PERSONAL ITEM COMPARTMENT (OPTIONAL)

Cassetto e antine in materiale plastico

Cod. 704TA000

Drawer and doors plastic colors



ARANCIO BOREALE



AZZURRO BORDIGHERA



CAPPUCCINO



FUXIA



VERDE AMENO



GREEN TREE

Cassetto e antine in laminato

Cod. 704T0000

Drawer and doors laminate finishes



ARANCIO BOREALE



AZZURRO BORDIGHERA



CAPPUCCINO



FUXIA



VERDE AMENO



GREEN TREE



ROVERE COP K 1009



TORTUGA 1

Comodino bifronte con scocca, cassetto e ante in materiale plastico

Double sided patient bedside cabinet with body, drawer and doors in moulded plastic

Cod. 704TA000



Cod. 704TAC00

Disponibile anche con tesoretto integrato
Built-in personal items storage compartment available

SCocca

Scocca realizzata in polietilene stampato. La geometria è caratterizzata da linee arrotondate, prive di spigoli che consentono un'efficace sanificazione ed evitano punti di accumulo dello sporco. Il piano superiore è dotato di ampia superficie di appoggio e bordo perimetrale di contenimento. Il vano interno presenta a metà altezza un piano di appoggio asportabile in materiale plastico e una griglia rimovibile sul fondo per garantire l'aerazione. Sui fianchi sono presenti, da un lato, un vano con portasalviette in materiale plastico e, dall'altro, due vani portabicchiere e due vani portabottiglia con fondo inclinato verso l'esterno, per facilitare l'estrazione della bottiglia, tutti dotati di fascette di contenimento.

CASSETTO

Cassetto monoblocco realizzato in polietilene stampato, con geometria priva di spigoli, caratterizzato da maniglie integrate; scorrevole e dotato di fermo per evitare l'estrazione accidentale; asportabile e internamente diviso in due vani con spigoli raccordati per favorire le operazioni di pulizia.

ANTINE

Antine monoblocco realizzate in polietilene stampato, con geometria priva di spigoli, caratterizzate da maniglia integrata; fissate alla scocca mediante due cerniere in alluminio e dotate di apertura a 180°.

PARACOLPI E RUOTE

La scocca sui quattro angoli della parte inferiore termina con sporgenze arrotondate che svolgono la funzione di paracolpi. Sul fondo sono fissate quattro ruote gemellari proiettanti di diametro 55 mm con guscio di protezione.

BODY

Made in polyethylene. Geometrically designed with rounded elements. No sharp edges allows efficient cleaning and eliminates areas of dust collection. Ample work surface with raised outer edges to avoid spills. The internal compartment contains an extractable plastic shelf and removable grid on bottom to guarantee ventilation. Side panels include: plastic tissue box; two cup holders, two bottle holders all outward facing to allow easy access. All accessories have holder covers.

DRAWER

Polyethylene moulded drawer. Geometrically designed with rounded edges and incorporated handles. Secure system to avoid sliding drawer from accidental opening; extractable and divided in two seamless compartments to make cleaning easy.

DOORS

Polyethylene moulded doors with rounded angles and integrated handles. Mounted on structure with two aluminium hinges allowing 180° opening capacity.

CORNER BUMPERS AND CASTORS

Four protective rounded corner bumpers on bottom of body structure. Four twin swivel castors diam. 55 mm with protective shell mounted to base support.

DIMENSIONI D'INGOMBRO TOTALE

L 615 P 485 H 750 mm

PESO COMODINO

14.5 kg

DIMENSIONI UTILI VANO INTERNO

325x380xH440 mm

DIMENSIONI UTILI CASSETTO

vano piccolo: 360x100xH85 mm

vano grande: 360x180xH85 mm

PACKAGING

L 620 P 500 H 920 mm

PESO DI SPEDIZIONE INDICATIVO

16.5 kg

CBM

0.28

ASSEMBLED CABINET DIMENSIONS

W 615 D 485 H 750 mm

CABINET WEIGHT

14.5 kg

INTERNAL CABINET DIMENSIONS

325x380xH440 mm

INTERNAL DRAWER DIMENSIONS

small drawer: 360x100xH85 mm

large drawer: 360x180xH85 mm

PACKAGING

L 620 P 500 H 920 mm

APPROXIMATE SHIPPING WEIGHT

16.5 kg

CBM

0.28

Comodino bifronte con scocca in materiale plastico cassetto e ante in laminato

Double sided patient bedside cabinet in moulded plastic with laminated drawer and doors

Cod. 704T0000



Cod. 704T0C00

Disponibile anche con tesoretto integrato
Built-in personal items storage compartment available

SCocca

Scocca realizzata in polietilene stampato. La geometria è caratterizzata da linee arrotondate, prive di spigoli che consentono un'efficace sanificazione ed evitano punti di accumulo dello sporco. Il piano superiore è dotato di ampia superficie di appoggio e bordo perimetrale di contenimento. Il vano interno presenta a metà altezza un piano di appoggio asportabile in materiale plastico e una griglia rimovibile sul fondo per garantire l'aerazione. Sui fianchi sono presenti, da un lato, un vano con portasalviette in materiale plastico e, dall'altro, due vani portabicchiere e due vani portabottiglia con fondo inclinato verso l'esterno, per facilitare l'estrazione della bottiglia, tutti dotati di fascette di contenimento.

CASSETTO

Corpo cassetto realizzato in materiale plastico, dotato internamente di due vani con spigoli raccordati per favorire le operazioni di pulizia. Frontali in laminato con bordo in ABS di spessore 2 mm e maniglia in gomma antitrauma. Il cassetto scorrevole e asportabile è dotato di fermo per evitare l'estrazione accidentale.

ANTINE

Antine in laminato con bordo in ABS di spessore 2 mm e maniglia in gomma antitrauma. Fissate alla scocca mediante due cerniere in alluminio, sono dotate di apertura a 180°.

PARACOLPI E RUOTE

La scocca sui quattro angoli della parte inferiore termina con sporgenze arrotondate che svolgono la funzione di paracolpi. Sul fondo sono fissate quattro ruote gemellari proiettanti di diametro 55 mm con guscio di protezione.

BODY

Made in polyethylene. Geometrically designed with rounded elements. No sharp edges allows efficient cleaning and eliminates areas of dust collection. Ample work surface with raised outer edges to avoid spills. The internal compartment contains an extractable plastic shelf and removable grid on bottom to guarantee ventilation. Side panels include: plastic tissue box; two cup holders, two bottle holders all outward facing to allow easy access. All accessories have holder covers.

DRAWER

Polyethylene body internally divided in two seamless compartments to make cleaning easy. Laminated front panel with 2 mm ABS edge and rubber anti-trauma handle. The sliding drawer is extractable with secure system to avoid accidental opening.

DOORS

Laminated doors with 2 mm ABS edge and rubber anti-trauma handle. Mounted on structure with two aluminium hinges allowing 180° opening capacity.

CORNER BUMPERS AND CASTORS

Four rounded protective corner bumpers on bottom of body structure. Four twin swivel castors diam. 55 mm with protective shell.

DIMENSIONI D'INGOMBRO TOTALE

L 615 P 485 H 750 mm

PESO COMODINO

14.5 kg

DIMENSIONI UTILI VANO INTERNO

325x380xH440 mm

DIMENSIONI UTILI CASSETTO

vano piccolo: 320x110xH85 mm

vano grande: 320x175xH85 mm

PACKAGING

L 620 P 500 H 920 mm

PESO DI SPEDIZIONE INDICATIVO

16.5 kg

CBM

0.28

ASSEMBLED CABINET DIMENSIONS

W 615 D 485 H 750 mm

CABINET WEIGHT

14.5 kg

INTERNAL CABINET DIMENSIONS

325x380xH440 mm

INTERNAL DRAWER DIMENSIONS

small drawer: 320x110xH85 mm

large drawer: 320x175xH85 mm

PACKAGING

W 620 D 500 H 920 mm

APPROXIMATE SHIPPING WEIGHT

16.5 kg

CBM

0.28

Comodino bifronte con scocca, cassetto e ante in materiale plastico predisposto per accogliere il tavolo servitore su carrello

Double sided patient bedside cabinet with body, drawer and doors in moulded plastic and optional serving table

Cod. 704TA001



Comodino con tavolo servitore su carrello (opzionale)
Bedside cabinet with over bed table on trolley (optional)

Comodino con tavolo servitore inclinabile a leggio su carrello
(opzionale)
Bedside cabinet with inclinable over bed table on trolley
(optional)



Cod. 704TAC01

Disponibile anche con tesoretto integrato
Built-in personal items storage compartment available



SCocca

Scocca realizzata in polietilene stampato. La geometria è caratterizzata da linee arrotondate, prive di spigoli che consentono un'efficace sanificazione ed evitano punti di accumulo dello sporco. Il piano superiore è dotato di ampia superficie di appoggio e bordo perimetrale di contenimento. Il vano interno presenta a metà altezza un piano di appoggio asportabile in materiale plastico e una griglia rimovibile sul fondo per garantire l'aerazione. Sui fianchi sono presenti, da un lato, un vano con portasalviette in materiale plastico e, dall'altro, due vani portabicchiere e due vani portabottiglia con fondo inclinato verso l'esterno, per facilitare l'estrazione della bottiglia, tutti dotati di fascette di contenimento. Centralmente ai vani è presente una rientranza che accoglie il tubo verticale del tavolo servitore contenendolo totalmente. Due piedi in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro sono fissati sul fondo e permettono l'inserimento del carrello del tavolo servitore nella scocca del comodino.

CASSETTO

Cassetto monoblocco realizzato in polietilene stampato, con geometria priva di spigoli, caratterizzato da maniglie integrate; scorrevole e dotato di fermo per evitare l'estrazione accidentale; asportabile e internamente diviso in due vani con spigoli raccordati per favorire le operazioni di pulizia.

ANTINE

Antine monoblocco realizzate in polietilene stampato, con geometria priva di spigoli, caratterizzate da maniglia integrata; fissate alla scocca mediante due cerniere in alluminio e dotate di apertura a 180°.

PARACOLPI E RUOTE

La scocca sui quattro angoli della parte inferiore termina con sporgenze arrotondate che svolgono la funzione di paracolpi. Alla base della scocca sono fissati il piede e le due ruote piroettanti.

BODY

Made in polyethylene. Geometrically designed with rounded elements, no sharp edges allowing efficient cleaning and eliminates areas of dust collection. Ample work surface with raised outer edges to avoid spills. The internal compartment contains an extractable plastic shelf and removable grid on bottom to guarantee ventilation. Side panels include: plastic tissue box; two cup holders, two bottle holders all outward facing to allow easy access. All accessories have holder covers. Optional serving table is contained in centre of cabinet with vertical support tube. Two epoxy coated painted steel reinforced supports allow serving table insertion.

DRAWER

Polyethylene moulded drawer. Geometrically designed with rounded edges and incorporated handles. Secure system to avoid sliding drawer from accidental opening; extractable and divided in two seamless compartments to make cleaning easy.

DOORS

Polyethylene moulded doors with rounded angles and integrated handles. Mounted on structure with two aluminium hinges allowing 180° opening capacity.

CORNER BUMPERS AND CASTORS

Four protective rounded corner bumpers on bottom of body structure. Two swivel castors are mounted on one side of the base supports.

DIMENSIONI D'INGOMBRO TOTALE

L 615 P 485 H 790 mm

PESO COMODINO

14.5 kg

DIMENSIONI UTILI VANO INTERNO

325x380xH440 mm

DIMENSIONI UTILI CASSETTO

vano piccolo: 360x100xH85 mm

vano grande: 360x180xH85 mm

PACKAGING

L 700 P 485 H 955 mm

PESO DI SPEDIZIONE INDICATIVO

16.5 kg

CBM

0.28

ASSEMBLED CABINET DIMENSIONS

W 615 D 485 H 790 mm

CABINET WEIGHT

14.5 kg

INTERNAL CABINET DIMENSIONS

325x380xH440 mm

INTERNAL DRAWER DIMENSIONS

small drawer: 360x100xH85 mm

large drawer: 360x180xH85 mm

PACKAGING

W 700 D 485 H 955 mm

APPROXIMATE SHIPPING WEIGHT

16.5 kg

CBM

0.28

Comodino bifronte con scocca in materiale plastico cassetto e ante in laminato predisposto per accogliere il tavolo servitore su carrello

Double sided patient bedside cabinet in moulded plastic with laminated drawer and doors with serving table option

Cod. 704T0001



Comodino con tavolo servitore su carrello (opzionale)
Bedside cabinet with over bed table on trolley (optional)

Comodino con tavolo servitore inclinabile a leggio su carrello
(opzionale)
Bedside cabinet with inclinable over bed table on trolley
(optional)



Cod. 704T0C01



Disponibile anche con tesoretto integrato
Built-in personal items storage compartment available

SCocca

Scocca realizzata in polietilene stampato. La geometria è caratterizzata da linee arrotondate, prive di spigoli che consentono un'efficace sanificazione ed evitano punti di accumulo dello sporco. Il piano superiore è dotato di ampia superficie di appoggio e bordo perimetrale di contenimento. Il vano interno presenta a metà altezza un piano di appoggio asportabile in materiale plastico e una griglia rimovibile sul fondo per garantire l'aerazione. Sui fianchi sono presenti, da un lato, un vano con portasalviette in materiale plastico e, dall'altro, due vani portabicchiere e due vani portabottiglia con fondo inclinato verso l'esterno, per facilitare l'estrazione della bottiglia, tutti dotati di fascette di contenimento. Centralmente ai vani è presente una rientranza che accoglie il tubo verticale del tavolo servitore contenendolo totalmente. Due piedi in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro sono fissati sul fondo e permettono l'inserimento del carrello del tavolo servitore nella scocca del comodino.

CASSETTO

Corpo cassetto realizzato in materiale plastico, dotato internamente di due vani con spigoli raccordati per favorire le operazioni di pulizia. Frontali in laminato con bordo in ABS di spessore 2 mm e maniglia in gomma antitrauma. Il cassetto scorrevole e asportabile è dotato di fermo per evitare l'estrazione accidentale;

ANTINE

Antine in laminato con bordo in ABS di spessore 2 mm e maniglia in gomma antitrauma. Fissate alla scocca mediante due cerniere in alluminio, sono dotate di apertura a 180°.

PARACOLPI E RUOTE

La scocca sui quattro angoli della parte inferiore termina con sporgenze arrotondate che svolgono la funzione di paracolpi. Alla base della scocca sono fissati il piede e le due ruote piroettanti.

BODY

Made in polyethylene film. Geometrically designed with rounded elements, no sharp edges allowing efficient cleaning and eliminates areas of dust collection. Ample work surface with raised outer edges to avoid spills. The internal compartment contains an extractable plastic shelf and removable grid on bottom to guarantee ventilation. Side panels include: plastic tissue box; two cup holders, two bottle holders all outward facing to allow easy access. All accessories have holder covers. Optional serving table is contained in centre of cabinet with vertical support tube. Two epoxy coated painted steel reinforced supports allow serving table insertion.

DRAWER

Drawer body made in polyethylene film and divided in two seamless compartments to make cleaning easy. Laminated front panel with 2 mm ABS edge and rubber anti-trauma handle. The sliding drawer is extractable with secure system to avoid accidental opening.

DOORS

Laminated doors with 2 mm ABS edge and rubber anti-trauma handle. Mounted on structure with two aluminium hinges allowing 180° opening capacity.

CORNER BUMPERS AND CASTORS

Four rounded protective corner bumpers on bottom of body structure. Two swivel castors are mounted on one side of the base supports.

DIMENSIONI D'INGOMBRO TOTALE

L 615 P 485 H 790 mm

PESO COMODINO

14.5 kg

DIMENSIONI UTILI VANO INTERNO

325x380xH440 mm

DIMENSIONI UTILI CASSETTO

vano piccolo: 320x110xH85 mm

vano grande: 320x175xH85 mm

PACKAGING

L 700 P 485 H 955 mm

PESO DI SPEDIZIONE INDICATIVO

16.5 kg

CBM

0.28

ASSEMBLED CABINET DIMENSIONS

W 615 D 485 H 790 mm

CABINET WEIGHT

14.5 kg

INTERNAL CABINET DIMENSIONS

325x380xH440 mm

INTERNAL DRAWER DIMENSIONS

small drawer: 320x110xH85 mm

large drawer: 320x175xH85 mm

PACKAGING

W 700 D 485 H 955 mm

APPROXIMATE SHIPPING WEIGHT

16.5 kg

CBM

0.28

Comodino bifronte con scocca, cassetto e ante in materiale plastico con tavolo servitore con inclinazione a leggio

Double sided patient bedside cabinet with body, drawer and doors in moulded plastic and inclinable serving table

Cod. 704TA002



Cod. 704TAC02

Disponibile anche con tesoretto integrato
Built-in personal items storage compartment available



SCocca

Scocca realizzata in polietilene stampato. La geometria è caratterizzata da linee arrotondate, prive di spigoli che consentono un'efficace sanificazione ed evitano punti di accumulo dello sporco. Il piano superiore è dotato di ampia superficie di appoggio e bordo perimetrale di contenimento. Il vano interno presenta a metà altezza un piano di appoggio asportabile in materiale plastico e una griglia rimovibile sul fondo per garantire l'aerazione. Sui fianchi sono presenti, da un lato, un vano con portasalviette in materiale plastico e, dall'altro, due vani portabicchiere e due vani portabottiglia con fondo inclinato verso l'esterno, per facilitare l'estrazione della bottiglia, tutti dotati di fascette di contenimento. Centralmente ai vani è presente una rientranza che accoglie il tubo verticale del tavolo servitore contenendolo totalmente.

CASSETTO

Cassetto monoblocco realizzato in polietilene stampato, con geometria priva di spigoli, caratterizzato da maniglie integrate; scorrevole e dotato di fermo per evitare l'estrazione accidentale; asportabile e internamente diviso in due vani con spigoli raccordati per favorire le operazioni di pulizia.

ANTINE

Antine monoblocco realizzate in polietilene stampato, con geometria priva di spigoli, caratterizzate da maniglia integrata; fissate alla scocca mediante due cerniere in alluminio e dotate di apertura a 180°.

PARACOLPI E RUOTE

La scocca sui quattro angoli della parte inferiore termina con sporgenze arrotondate che svolgono la funzione di paracolpi. Sul fondo sono fissate quattro ruote gemellari piroettanti di diametro 55 mm con guscio

TAVOLO SERVITORE

Tavolo servitore fissato alla scocca del comodino; struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche con piano in materiale plastico dotato di bordo perimetrale di contenimento per evitare riversamenti di liquidi. Scorrevole orizzontalmente e girevole a 360° con regolazione in altezza assistita da molla a gas; possibilità di bloccaggio in qualunque posizione. Piano inclinabile in diverse angolazioni per la funzione leggìo.

BODY

Made in polyethylene. Geometrically designed with rounded elements, no sharp edges allowing efficient cleaning and eliminates areas of dust collection. Ample work surface with raised outer edges to avoid spills. The internal compartment contains an extractable plastic shelf and removable grid on bottom to guarantee ventilation. Side panels include: plastic tissue box; two cup holders, two bottle holders all outward facing to allow easy access. All accessories have holder covers. Serving table is contained in centre of cabinet with vertical support tube.

DRAWER

Polyethylene moulded drawers. Geometrically designed rounded edges with incorporated handle. Secure system to avoid sliding drawers from accidental opening; extractable and divided in two seamless compartments to make cleaning easy.

DOORS

Polyethylene moulded doors with rounded angles and integrated handles. Mounted on structure with two aluminium hinges allowing 180° opening capacity.

CORNER BUMPERS AND CASTORS

Four protective rounded corner bumpers on bottom of body structure. Four twin swivel castors diam. 55 mm with protective shell mounted to base support.

SERVING TABLE

Serving table fixed to body of trolley with vertical external tube in epoxy powder-coated steel and chrome steel structure; table in moulded plastic with raised edges to avoid spills. 360° rotation and horizontal manoeuvrability; adjustable height regulation allowing to adjust height and block at desired position. Inclinable table at variable angles for reading purposes.

Cod. 704TA002



SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO PER UNA MAGGIORE STABILITÀ
STABILIZING FRAME PROVIDES CABINET WITH ADDED STABILITY



DIMENSIONI D'INGOMBRO TOTALE

L 615 P 485 H 910 mm

PESO COMODINO

21.5 kg

DIMENSIONI UTILI VANO INTERNO

325x380xH440 mm

DIMENSIONI UTILI CASSETTO

vano piccolo: 360x100xH85 mm

vano grande: 360x180xH85 mm

DIMENSIONI PIANO TAVOLO SERVITORE

570x440 mm

ELEVAZIONE IN ALTEZZA

da 910 mm a 1210 mm

ESTENSIONE ORIZZONTALE PIANO

150 mm

PACKAGING

L 620 P 500 H 920 mm

PESO DI SPEDIZIONE INDICATIVO

23.5 kg

CBM

0.28

ASSEMBLED CABINET DIMENSIONS

W 615 D 485 H 910 mm

CABINET WEIGHT

21.5 kg

INTERNAL CABINET DIMENSIONS

325x380xH440 mm

INTERNAL DRAWER DIMENSIONS

small drawer: 360x100xH85 mm

large drawer: 360x180xH85 mm

SERVING TABLE DIMENSIONS

570x440 mm

ADJUSTABLE HEIGHT

from 910 mm to 1210 mm

HORIZONTAL EXTENSION SURFACE

150 mm

PACKAGING

L 620 P 500 H 920 mm

APPROXIMATE SHIPPING WEIGHT

23.5 kg

CBM

0.28



Comodino bifronte con scocca in materiale plastico cassetto e ante in laminato con tavolo servitore con inclinazione a leggio

Double sided patient bedside cabinet in moulded plastic with laminated drawer and doors and inclinable serving table

Cod. 704T0002



Cod. 704T0C02

Disponibile anche con tesoretto integrato
Built-in personal items storage compartment available

SCocca

Scocca realizzata in polietilene stampato. La geometria è caratterizzata da linee arrotondate, prive di spigoli che consentono un'efficace sanificazione ed evitano punti di accumulo dello sporco. Il piano superiore è dotato di ampia superficie di appoggio e bordo perimetrale di contenimento. Il vano interno presenta a metà altezza un piano di appoggio asportabile in materiale plastico e una griglia rimovibile sul fondo per garantire l'aerazione. Sui fianchi sono presenti, da un lato, un vano con portasalviette in materiale plastico e, dall'altro, due vani portabicchiere e due vani portabottiglia con fondo inclinato verso l'esterno, per facilitare l'estrazione della bottiglia, tutti dotati di fascette di contenimento. Centralmente ai vani è presente una rientranza che accoglie il tubo verticale del tavolo servitore contenendolo totalmente.

CASSETTO

Corpo cassetto realizzato in materiale plastico, dotato internamente di due vani con spigoli raccordati per favorire le operazioni di pulizia. Frontali in laminato con bordo in ABS di spessore 2 mm e maniglia in gomma antitrauma. Il cassetto scorrevole e asportabile è dotato di fermo per evitare l'estrazione accidentale;

ANTINE

Antine in laminato con bordo in ABS di spessore 2 mm e maniglia in gomma antitrauma. Fissate alla scocca mediante due cerniere in alluminio, sono dotate di apertura a 180°.

PARACOLPI E RUOTE

La scocca sui quattro angoli della parte inferiore termina con sporgenze arrotondate che svolgono la funzione di paracolpi. Sul fondo sono fissate quattro ruote gemellari piroettanti di diametro 55 mm con guscio di protezione.

TAVOLO SERVITORE

Tavolo servitore fissato alla scocca del comodino; struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche con piano in materiale plastico dotato di bordo perimetrale di contenimento per evitare riversamenti di liquidi. Scorrevole orizzontalmente e girevole a 360° con regolazione in altezza assistita da molla a gas; possibilità di bloccaggio in qualunque posizione. Piano inclinabile in diverse angolazioni per la funzione leggìo.

BODY

Made in polyethylene film. Geometrically designed with rounded elements, no sharp edges allowing efficient cleaning and eliminates areas of dust collection. Ample work surface with raised outer edges to avoid spills. The internal compartment contains an extractable plastic shelf removable grid on bottom to guarantee ventilation. Side panels include : plastic tissue box; two cup holders, two bottle holders all outward facing to allow easy access. All accessories have holder covers. Serving table is contained in centre of cabinet with vertical support tube.

DRAWER

Drawer body made in polyethylene film and divided in two seamless compartments to make cleaning easy. Laminated front panel with 2 mm ABS edge and rubber anti-trauma handle. The sliding drawer is extractable with secure system to avoid accidental opening.

DOORS

Laminated doors with 2 mm ABS edge and rubber anti-trauma handle. Mounted on structure with two aluminium hinges allowing 180° opening capacity.

CORNER BUMPERS AND CASTORS

Four rounded protective corner bumpers on bottom of body structure. Four twin swivel castors diam. 55 mm with protective shell mounted to base support.

SERVING TABLE

Serving table fixed to body of trolley; structure in epoxy powder-coated steel and table in moulded plastic with raised edges to avoid sills. 360° rotation and horizontal manoeuvrability; adjustable height regulation allowing to adjust height and block at desired position. Inclinable table at variable angles for reading purposes.

DIMENSIONI D'INGOMBRO TOTALE

L 615 P 485 H 910 mm

PESO COMODINO

21.5 kg

DIMENSIONI UTILI VANO INTERNO

325x380xH440 mm

DIMENSIONI UTILI CASSETTO

vano piccolo: 360x100xH85 mm

vano grande: 360x180xH85 mm

DIMENSIONI PIANO TAVOLO SERVITORE

570x440 mm

ELEVAZIONE IN ALTEZZA

da 910 mm a 1210 mm

ESTENSIONE ORIZZONTALE PIANO

150 mm

PACKAGING

L 620 P 500 H 920 mm

PESO DI SPEDIZIONE INDICATIVO

23.5 kg

CBM

0.28

ASSEMBLED CABINET DIMENSIONS

W 615 D 485 H 910 mm

CABINET WEIGHT

21.5 kg

INTERNAL CABINET DIMENSIONS

325x380xH440 mm

INTERNAL DRAWER DIMENSIONS

small drawer: 360x100xH85 mm

large drawer: 360x180xH85 mm

SERVING TABLE DIMENSIONS

570x440 mm

ADJUSTABLE HEIGHT

from 910 mm to 1210 mm

HORIZONTAL EXTENSION SURFACE

150 mm

PACKAGING

L 620 P 500 H 920 mm

APPROXIMATE SHIPPING WEIGHT

23.5 kg

CBM

0.28

Comodino bifronte con scocca, cassetto e ante in materiale plastico con tavolo servitore

Double sided patient bedside cabinet with body, drawer and doors in moulded plastic and serving table

Cod. 704TA003



Cod. 704TAC03

Disponibile anche con tesoretto integrato
Built-in personal items storage compartment available



SCocca

Scocca realizzata in polietilene stampato. La geometria è caratterizzata da linee arrotondate, prive di spigoli che consentono un'efficace sanificazione ed evitano punti di accumulo dello sporco. Il piano superiore è dotato di ampia superficie di appoggio e bordo perimetrale di contenimento. Il vano interno presenta a metà altezza un piano di appoggio asportabile in materiale plastico e una griglia rimovibile sul fondo per garantire l'aerazione. Sui fianchi sono presenti, da un lato, un vano con portasalviette in materiale plastico e, dall'altro, due vani portabicchiere e due vani portabottiglia con fondo inclinato verso l'esterno, per facilitare l'estrazione della bottiglia, tutti dotati di fascette di contenimento. Centralmente ai vani è presente una rientranza che accoglie il tubo verticale del tavolo servitore contenendolo totalmente.

CASSETTO

Cassetto monoblocco realizzato in polietilene stampato, con geometria priva di spigoli, caratterizzato da maniglie integrate; scorrevole e dotato di fermo per evitare l'estrazione accidentale; asportabile e internamente diviso in due vani con spigoli raccordati per favorire le operazioni di pulizia.

ANTINE

Antine monoblocco realizzate in polietilene stampato, con geometria priva di spigoli, caratterizzate da maniglia integrata; fissate alla scocca mediante due cerniere in alluminio e dotate di apertura a 180°.

PARACOLPI E RUOTE

La scocca sui quattro angoli della parte inferiore termina con sporgenze arrotondate che svolgono la funzione di paracolpi. Sul fondo sono fissate quattro ruote gemellari piroettanti di diametro 55 mm con guscio di protezione.

TAVOLO SERVITORE

Tavolo servitore fissato alla scocca del comodino; tubo verticale esterno in acciaio verniciato a polveri epossidiche e struttura in acciaio cromato con piano in materiale plastico dotato di bordo perimetrale di contenimento per evitare riversamenti di liquidi. Scorrevole orizzontalmente e girevole a 360°; regolazione in altezza con possibilità di bloccaggio manuale mediante leva in qualunque posizione.

BODY

Made in polyethylene. Geometrically designed with rounded elements, no sharp edges allowing efficient cleaning and eliminates areas of dust collection. Ample work surface with raised outer edges to avoid spills. The internal compartment contains an extractable plastic shelf and removable grid on bottom to guarantee ventilation. Side panels include : plastic tissue box; two cup holders, two bottle holders all outward facing to allow easy access. All accessories have holder covers. Serving table is contained in centre of cabinet with vertical support tube.

DRAWER

Polyethylene moulded drawer. Geometrically designed rounded edges with incorporated handle. Secure system to avoid sliding drawer from accidental opening; extractable and divided in two seamless compartments to make cleaning easy.

DOORS

Polyethylene moulded doors with rounded angles and integrated handles. Mounted on structure with two aluminium hinges allowing 180° opening capacity.

CORNER BUMPERS AND CASTORS

Four protective rounded corner bumpers on bottom of body structure. Four twin swivel castors diam. 55 mm with protective shell mounted to base support.

SERVING TABLE

Serving table fixed to body of trolley with vertical external tube in epoxy powder-coated steel and chrome steel structure; table in moulded plastic with raised edges to avoid spills. 360° rotation and horizontal manoeuvrability; adjustable height regulation allowing to adjust height and block at desired position.

Cod. 704TA003



SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO
PER UNA MAGGIORE STABILITÀ
STABILIZING FRAME PROVIDES CABINET
WITH ADDED STABILITY



DIMENSIONI D'INGOMBRO TOTALE

L 615 P 485 H 910 mm

PESO COMODINO

21.5 kg

DIMENSIONI UTILI VANO INTERNO

325x380xH440 mm

DIMENSIONI UTILI CASSETTO

vano piccolo: 360x100xH85 mm

vano grande: 360x180xH85 mm

DIMENSIONI PIANO TAVOLO SERVITORE

570x440 mm

ELEVAZIONE IN ALTEZZA

da 910 mm a 1210 mm

ESTENSIONE ORIZZONTALE PIANO

150 mm

PACKAGING

L 620 P 500 H 920 mm

PESO DI SPEDIZIONE INDICATIVO

23.5 kg

CBM

0.28

ASSEMBLED CABINET DIMENSIONS

W 615 D 485 H 910 mm

CABINET WEIGHT

21.5 kg

INTERNAL CABINET DIMENSIONS

325x380xH440 mm

INTERNAL DRAWER DIMENSIONS

small drawer: 360x100xH85 mm

large drawer: 360x180xH85 mm

SERVING TABLE DIMENSIONS

570x440 mm

ADJUSTABLE HEIGHT

from 910 mm to 1210 mm

HORIZONTAL EXTENSION SURFACE

150 mm

PACKAGING

L 620 P 500 H 920 mm

APPROXIMATE SHIPPING WEIGHT

23.5 kg

CBM

0.28



Comodino bifronte con scocca in materiale plastico cassetto e ante in laminato con tavolo servitore

Double sided patient bedside cabinet in moulded plastic with laminated drawer and doors and serving table

Cod. 704T0003



Cod. 704T0C03

Disponibile anche con tesoretto integrato
Built-in personal items storage compartment available

SCocca

Scocca realizzata in polietilene stampato. La geometria è caratterizzata da linee arrotondate, prive di spigoli che consentono un'efficace sanificazione ed evitano punti di accumulo dello sporco. Il piano superiore è dotato di ampia superficie di appoggio e bordo perimetrale di contenimento. Il vano interno presenta a metà altezza un piano di appoggio asportabile in materiale plastico e una griglia rimovibile sul fondo per garantire l'aerazione. Sui fianchi sono presenti, da un lato, un vano con portasalviette in materiale plastico e, dall'altro, due vani portabicchiere e due vani portabottiglia con fondo inclinato verso l'esterno, per facilitare l'estrazione della bottiglia, tutti dotati di fascette di contenimento. Centralmente ai vani è presente una rientranza che accoglie il tubo verticale del tavolo servitore contenendolo totalmente.

CASSETTO

Corpo cassetto realizzato in materiale plastico, dotato internamente di due vani con spigoli raccordati per favorire le operazioni di pulizia. Frontali in laminato con bordo in ABS di spessore 2 mm e maniglia in gomma antitrauma. Il cassetto scorrevole e asportabile è dotato di fermo per evitare l'estrazione accidentale;

ANTINE

Antine in laminato con bordo in ABS di spessore 2 mm e maniglia in gomma antitrauma. Fissate alla scocca mediante due cerniere in alluminio, sono dotate di apertura a 180°.

PARACOLPI E RUOTE

La scocca sui quattro angoli della parte inferiore termina con sporgenze arrotondate che svolgono la funzione di paracolpi. Sul fondo sono fissate quattro ruote gemellari piroettanti di diametro 55 mm con guscio di protezione.

TAVOLO SERVITORE

Tavolo servitore fissato alla scocca del comodino; tubo verticale esterno in acciaio verniciato a polveri epossidiche e struttura in acciaio cromato con piano in materiale plastico dotato di bordo perimetrale di contenimento per evitare riversamenti di liquidi. Scorrevole orizzontalmente e girevole a 360°; regolazione in altezza con possibilità di bloccaggio manuale mediante leva in qualunque posizione.

BODY

Made in polyethylene. Geometrically designed with rounded elements, no sharp edges allowing efficient cleaning and eliminates areas of dust collection. Ample work surface with raised outer edges to avoid spills. The internal compartment contains an extractable plastic shelf and removable grid on bottom to guarantee ventilation. Side panels include : plastic tissue box; two cup holders, two bottle holders all outward facing to allow easy access. All accessories have holder covers. Serving table is contained in centre of cabinet with vertical support tube.

DRAWER

Drawer body made in polyethylene and divided in two seamless compartments to make cleaning easy. Laminated front panel with 2 mm ABS edge and rubber anti-trauma handle. The sliding drawer is extractable with secure system to avoid accidental opening.

DOORS

Laminated doors with 2 mm ABS edge and rubber anti-trauma handle. Mounted on structure with two aluminium hinges allowing 180° opening capacity.

CORNER BUMPERS AND CASTORS

Four rounded protective corner bumpers on bottom of body structure. Four twin swivel castors diam. 55 mm with protective shell mounted to base support.

SERVING TABLE

Serving table fixed to body of trolley; vertical external tube in epoxy powder-coated steel and chrome steel structure; table in moulded plastic with raised edges to avoid sills. 360° rotation and horizontal manoeuvrability; adjustable height regulation allowing to adjust height and block at desired position.

DIMENSIONI D'INGOMBRO TOTALE

L 615 P 485 H 910 mm

PESO COMODINO

21.5 kg

DIMENSIONI UTILI VANO INTERNO

325x380xH440 mm

DIMENSIONI UTILI CASSETTO

vano piccolo: 360x100xH85 mm

vano grande: 360x180xH85 mm

DIMENSIONI PIANO TAVOLO SERVITORE

570x440 mm

ELEVAZIONE IN ALTEZZA

da 910 mm a 1210 mm

ESTENSIONE ORIZZONTALE PIANO

150 mm

PACKAGING

L 620 P 500 H 920 mm

PESO DI SPEDIZIONE INDICATIVO

23.5 kg

CBM

0.28

ASSEMBLED CABINET DIMENSIONS

W 615 D 485 H 910 mm

CABINET WEIGHT

21.5 kg

INTERNAL CABINET DIMENSIONS

325x380xH440 mm

INTERNAL DRAWER DIMENSIONS

small drawer: 360x100xH85 mm

large drawer: 360x180xH85 mm

SERVING TABLE DIMENSIONS

570x440 mm

ADJUSTABLE HEIGHT

from 910 mm to 1210 mm

HORIZONTAL EXTENSION SURFACE

150 mm

PACKAGING

L 620 P 500 H 920 mm

APPROXIMATE SHIPPING WEIGHT

23.5 kg

CBM

0.28

Tavoli servitore su carrello

Over bed tables

Carrello servitore su ruote da inserire, a scomparsa, lateralmente nella struttura del comodino. L'intero ingombro del tavolo servitore rientra nelle dimensioni del comodino senza ulteriori sporgenze. Grazie al basamento con forma a "C" può essere utilizzato per far mangiare il paziente seduto su una poltrona o sul letto.

With its C-shaped base, the over bed table is fully contained within bedside cabinet body. C-shaped wheelbase allows it to be positioned inside cabinet body compartment without taking up any extra space. Thanks to the C-shaped base the table may be used to assist the patient to eat when seated in an armchair or when lying on bed.



DIMENSIONI D'INGOMBRO TOTALE

L 680 P 440 H 910 mm

PESO

10.2 kg

ELEVAZIONE IN ALTEZZA

da 910 mm a 1210 mm

DIMENSIONI PIANO TAVOLO SERVITORE

570x440 mm

ESTENSIONE ORIZZONTALE PIANO

150 mm

PACKAGING

L 700 P 485 H 955 mm

PESO DI SPEDIZIONE INDICATIVO

12.2 kg

CBM

0.32

ASSEMBLED CABINET DIMENSIONS

W 680 D 440 H 910 mm

WEIGHT

10.2 kg

ADJUSTABLE HEIGHT

from 910 mm to 1210 mm

TABLE TOP SIZE

570x440 mm

HORIZONTAL EXTENSION SURFACE

150 mm

PACKAGING

W 700 D 485 H 955 mm

APPROXIMATE SHIPPING WEIGHT

12.2 kg

CBM

0.32

Tavolo servitore su carrello

Serving table on trolley with wheels

Cod. 70400110



STRUTTURA

Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche antimicrobiche; carrello dotato di ruote gemellari piroettanti di diametro 55 mm con guscio di protezione. La forma aperta a "C" del carrello consente l'impiego del tavolo servitore anche nel caso di pazienti seduti in poltrona.

PIANO

Piano in materiale plastico dotato di bordo perimetrale di contenimento per evitare riversamenti di liquidi. Scorrevole orizzontalmente con regolazione in altezza assistita da molla a gas; possibilità di bloccaggio in altezza in qualunque posizione.

STRUCTURE

Structure in steel protected by antimicrobial epoxy coating; twin swivel castors diam. 55 mm with protection shell. "C" shape for standing or sitting position.

SURFACE

Surface in plastic with raised outer edges to avoid liquid spills. Horizontal manoeuvrability with adjustable height regulation allowing to adjust height and block at desired position.

Tavolo servitore con inclinazione a leggio su carrello

Inclinable serving table on trolley with wheels

Cod. 70400111



STRUTTURA

Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche; carrello dotato di ruote gemellari piroettanti di diametro 55 mm con guscio di protezione. La forma aperta a "C" del carrello consente l'impiego del tavolo servitore anche nel caso di pazienti seduti in poltrona.

PIANO

Piano in materiale plastico dotato di bordo perimetrale di contenimento per evitare riversamenti di liquidi. Scorrevole orizzontalmente con regolazione in altezza assistita da molla a gas; possibilità di bloccaggio in altezza in qualunque posizione. Piano inclinabile in diverse angolazioni per la funzione leggio.

STRUCTURE

Structure in steel protected by antimicrobial epoxy coating; twin swivel castors diam. 55 mm with protection shell. "C" shape for standing or sitting position.

SURFACE

Surface in plastic with raised outer edges to avoid liquid spills. Horizontal manoeuvrability with adjustable height regulation allowing to adjust height and block at desired position. Inclinable table at variable angles for reading purposes.

COMODINI E TAVOLI SERVITORI
Bedside cabinets and overbed tables



PamMobility s.r.l.

Via Verdi, 39
42043 Gattatico (RE)
Tel. 0522 473859
Fax 0522 1548244
Web site: www.pammobility.com
Address e-mail: info@pammobility.com

P.Iva / C.F.: 02429390350

Sistema di gestione per la qualità
certificato UNI EN ISO 9001:2008